




PROLIFE

tecnologia a serviço da medicina

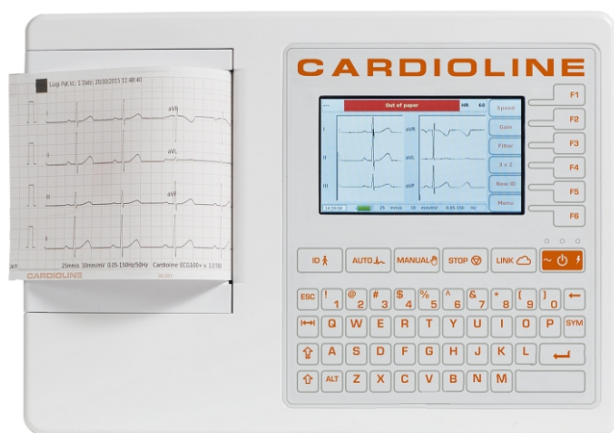

Peso: 1,8kg


Eletrocardiógrafo ECG100S

O ECG100S é um eletrocardiógrafo de 12 derivações simultâneas, com alta capacidade de processamento e transmissão dos exames gerados. Possui tela de 4,3", impressora termossensível de 100mm com possibilidade de impressão em 3 ou 6 canais. Os dados podem ser enviados pelo botão LINK para o software ECG EasyApp, que permite importar, analisar, laudar e organizar os exames, além de permitir impressões futuras.

Diferenciais:

- Memória de 100 exames, opcional expansão para 1000 exames;
- Opcional exportação de exames via LAN ou WiFi;
- Facilidades para integrações;
- Permite revisar e imprimir exames;
- Detecção de marca-passo e eletrodos soltos;
- ECG emergencial;
- Canal de ritmo: DII longo;
- Teclado de membrana de fácil higienização.

Seu Kit ECG100S é composto por:

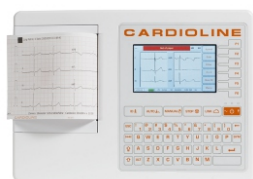

ECG100S



Cabo paciente
tipo banana 10 vias




Kit eletrodo
tipo pera




Kit cardioclip adulto



Fonte de alimentação

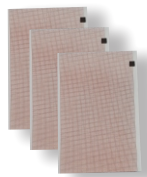

3 blocos de papel z-fold
100mm termossensível

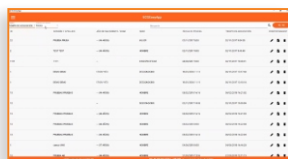

Software de análise
ECG EasyApp

Especificação para utilização do software ECG EasyApp

Sistema Operacional: Windows 7 32/64 bits, ou superior
Processador: Intel 2GHz ou superior
Memória RAM: 4GB ou superior
Espaço no disco rígido: 8GB ou superior
Tamanho de tela: 15" (18,5" recomendado)
USB: 1x 2.0
PDF reader instalado